



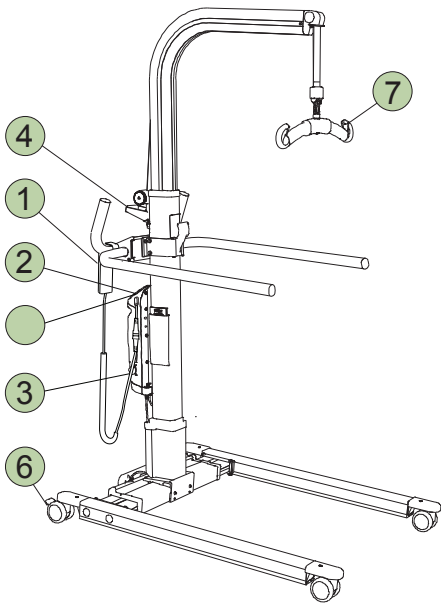


1 Handbediening

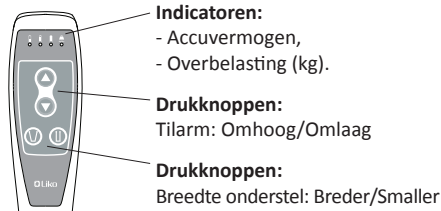

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


2 Elektrische nooddaal-/hef-functie

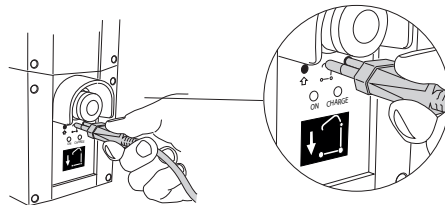


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

3 Noodstop-schakelaar

Activeren:

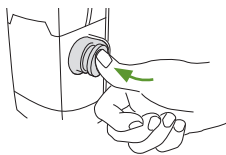


Resetten:

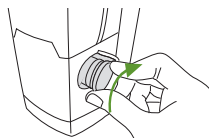


4 Mechanische nooddaalfunctie

Activeren:

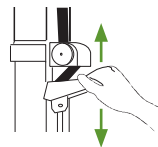


Herstellen van tilhoogte:

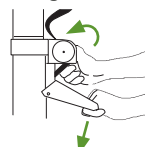


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.


6 Vergrendeling van de wielen

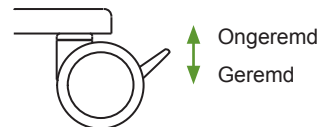

7 Veiligheidsclips

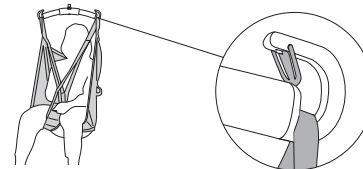


Schuin tillen moet worden vermeden!

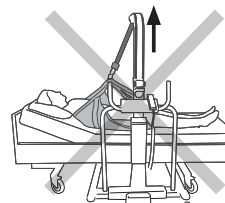

⚠ Het tillen vanuit een schuine hoek kan ertoe leiden dat de lift kantelt!

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Laden van de batterijen

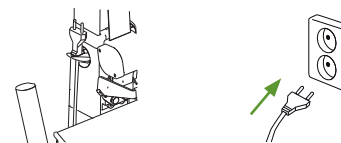

- Houd het voor gewoonte om de batterijen na gebruik te laden.
- Tijdens het laden werkt de lift niet.
- **De lift kan niet worden opgeladen met ingedrukte noodstopknop.**

Ergonomie

- Niet met de hand tillen – laat de lift het werk doen.
- Haast niet – werk rustig en methodisch.
- Spaar uw rug – werk in staande houding met een rechte rug.
- Maak gebruik van de functie voor verhoging/verlaging van het bed.
- Gebruik uw kracht op correcte wijze – sta dichtbij.

Reiniging

Indien nodig kan de lift worden gereinigd door deze met een vochtige doek met warm water of reinigingsalcohol schoon te vegen.

Vereenvoudigd storing zoeken

Controleer:

- of de noodstop soms is ingedrukt, zie ③
- of de accu van de lift opgeladen is
- of het oplaadsnoer niet is aangesloten op een stopcontact.

Overige instructiekaarten

De instructiekaarten voor Liko patiëntenliften en tilbanden kunnen worden gedownload bij www.liko.com.

© Copyright Liko AB



Intertek



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Fabrikant:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

BELANGRIJK!

Deze instructiekaart mag niet worden gezien als een vervanging van de normale gebruiksaanwijzing van de lift. Deze kan worden gedownload bij www.liko.com.