



lopital®

Als de zorg mag kiezen



Gebruikershandleiding
Amfora
hydraulisch douchebrancard



Gebruikershandleiding

Amfora

6200 4015

hydraulisch douchebrancard

Basic UDI-DI: 872025610341762004015KL



 **lopital®**
Als de zorg mag kiezen

Belangrijk:

Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Amfora in gebruik neemt!

Datum ingebruikname.....

Gebruiker.....

Naam.....

Adres.....

Fabrikant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Oisterwijk

T +31 (0)13 5239300

www.lopital.nl

info@lopital.nl

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Uitleg symbolen in handleiding en op labels			
	Let op		Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
	Productiedatum		Lees het reinigings- en desinfectieprotocol.
	Fabrikant informatie		Antibacterieel
	Artikelnummer		Temperatuur
	Serienummer		Luchtdruk
	Conformité Européenne		Vochtigheidsgraad
	Medisch apparaat		Maximale belasting

Inhoudsopgave

1.	Introductie	5
1.1.	Inleiding	5
1.2.	Veiligheid	5
1.3.	Garantie	7
2.	Gebruik	7
2.1.	Ingebruikname	7
2.2.	Werken met de Amfora	9
3.	Bediening	10
3.1.	Wielblokkering.....	10
3.2.	Zijhek.....	10
3.3.	Rugverstelling.....	10
3.4.	Omhoog / Omlaag bewegen	11
3.5.	Waterafvoer	11
4.	Reiniging en onderhoud.....	12
5.	Omgevingscondities	13
6.	Verwijdering onderdelen	13
7.	Technische gegevens	13
7.1.	Opbouw	13
7.2.	Afmetingen	14

1. Introductie

1.1. Inleiding

De douchebrancard Amfora is een hulpmiddel voor het ergonomisch verantwoord verzorgen en wassen van cliënten. Voor zowel de cliënt als de verzorger is het comfort optimaal. De douchebrancard is multifunctioneel te gebruiken en sluit aan bij het gebruik van andere hulpmiddelen zoals bedden, rol- en douchestoelen, tilliften en glijmaterialen zoals de EasySlide. Dit zijn de essentiële functies van de douchebrancard.



Het frame van de Amfora is voorzien van een antibacteriële coating. De coating bevat zilverionen. Antibacteriële coating op basis van zilverionen voorkomt dat gevaarlijke micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en algen zich vermenigvuldigen en verspreiden. De effectiviteit werd bevestigd in verschillende testen. Ziektekiemen werden in korte tijd aantoonbaar tot 99,99% verminderd. De coating heeft alleen effect op bacteriën die zich op het oppervlak bevinden en niet op micro-organismen in de lucht. De coating beschermt gebruikers of anderen tegen ziekteverwekkende bacteriën, ziektekiemen, virussen of andere schadelijke organismen. Bij een vuil oppervlak verliest de coating zijn antibacteriële werking. Goed reinigen en desinfecteren blijft dus nog steeds een must.

De verwachte technische levensduur van de douchebrancard Amfora is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek onderhoud volgens aangegeven onderhoudsschema wordt uitgevoerd (*Zie hoofdstuk 5. Reiniging en onderhoud*).

De Amfora is een medisch Klasse I product met CE-markering. Deze markering is conform de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.

1.2. Veiligheid



Het niet naleven van onderstaande veiligheidspunten en de verdere beschrijvingen in deze gebruikershandleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties. Lees deze daarom voor gebruik door.

Gebruik

- Het is niet toegestaan de douchebrancard te belasten met een gewicht van meer dan 150 kg.
- Gebruik alleen originele, door Lopital geleverde onderdelen.
- Gebruik de douchebrancard in een schone en nette werkomgeving.
- Het werken met de douchebrancard is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar gekwalificeerde personen.
- Zwembadomstandigheden behoren niet tot 'normale omstandigheden' en zullen de levensduur

van bepaalde onderdelen verkorten.

- De douchebrancard mag niet gebruikt worden op een ondergrond met een helling van meer dan 5 graden zijwaarts.
- De douchebrancard mag niet gebruikt worden op een ondergrond met een helling van meer dan 10 graden voorwaarts / achterwaarts.
- Tijdens het gebruik van de douchebrancard mag de watertemperatuur maximaal 43°C zijn.
- De douchebrancard mag alleen binnenshuis gebruikt worden.
- Zorg ervoor dat bij cliëntentransfers de douchebrancard altijd op de rem staat.
- Instrueer de cliënt voordat u de douchebrancard gaat bewegen.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de Amfora in een fysiek niet belastende positie.
- Tijdens het verrijden de douchebrancard niet omhoog / omlaag bewegen.
- Het is niet toegestaan de douchebrancard te gebruiken voor het verplaatsen van andere middelen dan een persoon.
- Let op obstakels bij het omhoog- en omlaag bewegen.

Onderhoud

- De douchebrancard dient minimaal 1 keer per jaar periodiek geïnspecteerd en onderhouden te worden.
- Bij beschadiging het ligvlak, deze altijd vervangen in verband met hygiëne.
- Service en onderhoud aan de douchebrancard is alleen toegestaan door daartoe door Lopital gekwalificeerde personen.
- Het vervangen van constructieve delen van de douchebrancard is alleen toegestaan door daartoe door Lopital gekwalificeerde personen.
- Indien er vervormingen zijn opgetreden aan de douchebrancard door foutief gebruik, transport, een ongeluk of door ondeskundig onderhoud, dan mag deze niet meer gebruikt worden en dient er contact opgenomen te worden met de leverancier.

In geval van storingen dient u contact op te nemen met Lopital of met uw lokale leverancier.

E-mail: info@lopital.nl



De Amfora douchebrancard dient uitsluitend te worden bediend deskundig personeel welke bovendien over ervaring beschikken om met de gebruikers doelgroep te werken en de instructie-/ trainingsvideo's heeft gekeken op de website van Lopital.



De Amfora douchebrancard is ontwikkeld en geproduceerd voor gebruik in een professionele zorgomgeving.



Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de Amfora aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en garantievoorzwaarden van Lopital. De Amfora voldoet hierdoor niet meer aan de verordening MDR (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.



Als zich een ernstig incident voordoet met betrekking tot dit medische hulpmiddel waarbij de zorgverlener of de cliënt betrokken is, moet dit worden gemeld aan Lopital of de distributeur van het medische hulpmiddel.

1.3. Garantie

Op producten van Lopital wordt 5 jaar garantie gegeven, op constructie- en / of materiaalfouten, tenzij anders vermeld. Bij afwijkende termijnen staat de exacte garantieperiode vermeld op uw factuur, welke tevens dient als garantiebewijs. Op onderdelen en accu's die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en / of materiaalfouten.

2. Gebruik

2.1. Ingebruikname

Voordat u de douchebrancard in gebruik neemt, controleert u of onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Deze onderdelen kunnen worden vervangen bij schade door gekwalificeerde personen.



2.2. Werken met de Amfora

Stap 1

Zet bij personentransfers de douchebrancard altijd op de rem (*Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering*).

Stap 2

Plaats de douchebrancard naast het bed met het hoofdeinde aan de hoofdzijde van de cliënt.

Stap 3

Laat het zijhek van de douchebrancard zakken (*Zie paragraaf 3.2. Zijhek*).

Stap 4

Breng het ligvlak van de douchebrancard net boven het bedmatras en klap het zijhek naar beneden.

Stap 5

Schuif de douchebrancard tussen het hoofd- en voeteneinde, zodat deze zo ver mogelijk over het bed heen steekt.

Stap 6

Blokkeer de wielen van de douchebrancard (*Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering*).

Stap 7

Ga aan het andere bedeinde staan en plaats de EasySlide tussen de cliënt en de douchebrancard.

Stap 8

Schuif de cliënt met behulp van de EasySlide van het bed naar de douchebrancard.

Stap 9

Zet het ligvlak van de douchebrancard enkele centimeters hoger en sluit het zijhek.


Stap 10

Haal de wielen van de douchebrancard van de rem en haal de EasySlide weg (*Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering*).

3. Bediening

3.1. Wielblokkering


- De douchebrancard kan op de rem worden gezet door de blauwe lip (1) op het wiel, naar beneden te trappen (Zie figuur 1).
- Om de douchebrancard van de rem te halen moet dezelfde lip van het wiel omhoog bewogen worden, door aan de bovenkant van de lip te trappen (2) (Zie figuur 1).

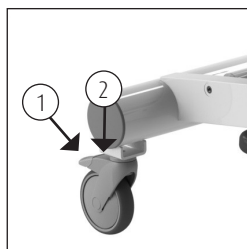

Figuur 1. Wielblokkering.

3.2. Zijhek


- De douchebrancard is voorzien van scharnierende zijhekken.
- Het zijhek is uitgevoerd met een hekbeveiliging, zodat de cliënt niet zelfstandig het zijhek kan lichten.
- Voordat het zijhek omlaag geklapt kan worden, dient de hekbeveiliging ontgrendeld te worden.
- Ontgrendel de beveiliging door de bouten aan beide kanten van het zijhek eruit te halen (1).
- Draai het ontgrendelde zijhek naar buiten (3).
- Draai het zijhek weer naar boven om het zijhek op te klappen. Het zijhek vergrendelt bij de verrijdbare douchebrancard door de bouten op de juiste plaats te bevestigen.

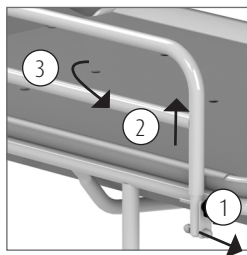

Figuur 2. Zijhek.

3.3. Rugverstelling


De Amfora is voorzien van een rugverstelling. Voor het verstellen van de rugleuning draait u de twee draaiknoppen aan weerszijden onder het ruggedeelte los. Breng de rugleuning in de gewenste stand en draai beide draaiknoppen vervolgens stevig vast om de rugleuning veilig te vergrendelen. Controleer altijd of de rugleuning goed is vastgezet voordat de douchebrancard in gebruik wordt genomen.

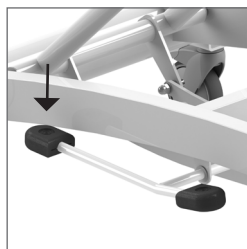

Figuur 3. Omhoog bewegen.



Controleer altijd of beide draaiknoppen volledig zijn vastgedraaid voordat een cliënt op de douchebrancard wordt verzorgd. Een niet goed vergrendelde rugleuning kan leiden tot een onveilige situatie.

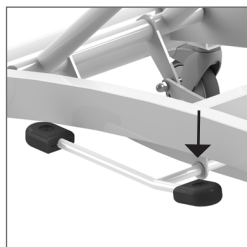

Figuur 4. Omlaag bewegen.

3.4. Omhoog / omlaag bewegen

Omhoog bewegen

- Als de cliënt op de douchebrancard ligt, eerst de wielen op de rem zetten en dan pas de douchebrancard omhoog bewegen.
- De douchebrancard beweegt omhoog door rustig en gelijkmatig het lange gedeelte van het voetpedaal in te trappen (*Zie figuur 3*).
- De verzorger gaat tijdens de trapbeweging met het bovenlichaam in de lengterichting van de douchebrancard staan, zodat de verzorger het bovenlichaam niet kan verdraaien ten opzichte van de voeten.
- Houd tijdens de omhooggaande beweging contact met de cliënt.

Omlaag bewegen

- De douchebrancard wordt omlaag bewogen door het korte gedeelte van het voetpedaal in te drukken (*Zie figuur 4*).
- De douchebrancard zakt onder invloed van de zwaartekracht. De daalsnelheid is te doseren door het pedaal licht ingedrukt te houden.
- Houd tijdens de omlaaggaande beweging contact met de cliënt.



Controleer voordat u de douchebrancard in hoogte gaat verplaatsen eerst of er geen personen of objecten zich onder de douchebrancard bevinden.

3.5. Waterafvoer

- Via de afvoerslang wordt het water uit de douchebrancard naar een afvoer geleid.
- Haal hiervoor de slang van de haak en leid deze naar een zo laag mogelijk gelegen afvoerpunt.
- Hang de slang tijdens transport altijd aan de haak, i.v.m. lekken en nadruppen.

4. Reiniging en onderhoud

De Amfora dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen. Indien nodig kunnen PUR delen met een oplossing van 70% ethanol of propanol gedesinfecteerd worden.


Controleer regelmatig de wielen op haren, stof en zeepresten en verwijder deze waar nodig. Onderhoud en reparatie aan de Amfora zijn alleen uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel.

Onderhoudsschema	
Na ieder gebruik	• Douchebrancard reinigen met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Dagelijks	• De bespanning reinigen en desinfecteren.
Wekelijks	• Frame reinigen. • Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en verwijderen waar nodig. • Controleren of de werking van de douchebrancard nog goed is.
Jaarlijks	• Volgens de verordening MDR (EU) 2017/745 medische hulpmiddelen moet een douchebrancard volgens de richtlijnen van de producent onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden gedaan door Lopital of een andere daartoe gekwalificeerde instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de douchebrancard 1 keer per jaar grondig te laten inspecteren en onderhouden, middels het Periodiek Preventief Onderhoud. Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u contact opnemen met Lopital (info@lopital.nl) of met uw leverancier.


Zie voor een volledige reinigings- en desinfectieinstructie het reinigings- en desinfectieprotocol op de website van Lopital (www.lopital.nl/onze-kennisbank/).

5. Omgevingscondities

Omgevingscondities bij opslag en transport

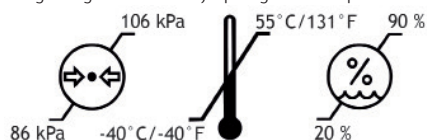

Omgevingscondities tijdens gebruik

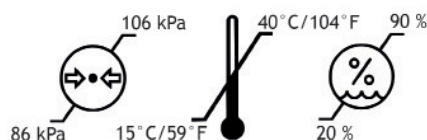

6. Verwijdering onderdelen

Alle onderdelen die vervangen of verwijderd worden, kunnen terug worden gestuurd naar Lopital BV. Ook is het mogelijk deze onderdelen aan de monteur aan te bieden voor vernietiging. Wij zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Wanneer u zelf zorgt voor de vernietiging van het product, dient u er rekening mee te houden dat accu en laders moeten worden afgevoerd als klein chemisch afval.

7. Technische gegevens

De douchebrancard is spatwaterdicht, dit houdt in dat de douchebrancard onder de douche gezet kan worden. Dit wordt aangegeven met de aanduiding IPX4.

7.1. Opbouw

Onderstel:	Aluminium + 2-laags poedercoating
Bovenframe:	Staal + 2-laags poedercoating
Zijhekken:	Staal + 2-laags poedercoating
Wielen:	Ø 12,5 cm, dubbel blokkeerbaar
Bevestigingsmiddelen:	RVS + verzinkt staal
Eigen gewicht:	63 kg
Maximale belasting:	150 kg

7.2. Afmetingen

Uitwendige maten (l x b x h):

190 x 74 x 50 tot 100 cm

Waterafvoerslang:



Inwendig Ø 4 cm

Wielbasis:

120 cm

Spoorbreedte:

65 cm

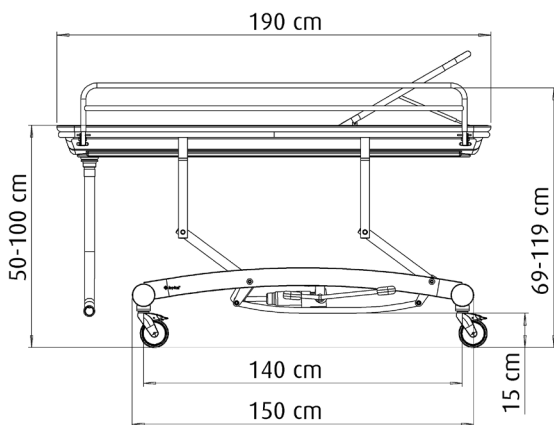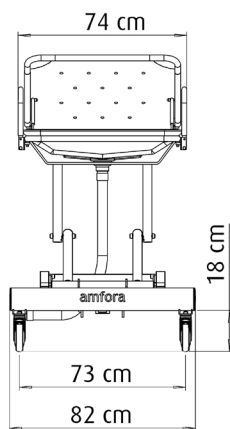



lopital®

Als de zorg mag kiezen



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56,
5060 AB Oisterwijk, Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl,
www.lopital.nl

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.



Green Deal



**MADE IN
THE NETHERLANDS**



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001



Scan for
information