

Reflex

Gekanteld voor comfort, gebouwd voor betrouwbaarheid

5100 5600

Reflex 5600 douche-toiletstoel in hoogte verstelbare voetsteunen

Deze elektrische, in hoogte verstelbare douche-toiletstoel is ontworpen om veilige en waardige zorg te bieden met maximaal comfort voor zowel de gebruiker als de zorgverlener. De geïntegreerde zitting biedt ondersteuning en comfort vergelijkbaar met een gewone stoel, terwijl essentiële functies zoals elektrische hoogteverstelling en een kanteling tot 30° beschikbaar zijn. Dit maakt de stoel ideaal voor zowel wassen als verzorging in diverse zorgomgevingen. Dankzij het multifunctionele ontwerp kan persoonlijke hygiënezorg ergonomisch en efficiënt worden uitgevoerd.

Voor extra veelzijdigheid is de stoel voorzien van afneembare en opklapbare voetsteunen met kuitondersteuning, wat transfers vergemakkelijkt en de ondersteuning van de benen verbetert. De opklapbare armsteunen maken zijwaartse transfers mogelijk, terwijl het robuuste onderstel zorgt voor een veilige en stabiele positionering boven een toilet of bij gebruik van een ondersteek of toiletemmer. De soepele elektrische bediening en intuïtieve besturing maken dit tot een praktische oplossing voor zorgverleners en een comfortabele, veilige zitplaats voor gebruikers met mobiliteitsbeperkingen.

Ergonomisch in gebruik. Uitgerust met slimme handgrepen en vier geremde zwenkwielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid, met hoge stabiliteit op verschillende ondergronden en minimale belasting van de gewrichten van de zorgverlener.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Technische specificaties

Max. belasting	135 kg
Productgewicht	53 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte (verstelling)	50 tot 100 cm



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

5100 5600

Reflex 5600 douche-toiletstoel

In hoogte en diepte
verstelbare hoofd-/
nekondersteuning

Ergonomische hand-
greep voor soepele
en lichte bediening

Ergonomische zitting

Universele geleider
voor po/ondersteek

Sterk en stabiel
frame voor maximale
veiligheid en
ondersteuning

Armsteunen met
voorwaartse sluiting
voor extra veiligheid
en zekerheid

Afneembare en in
hoogte verstelbare
voetsteunen en
kuitondersteuning

Bumper ter bescherming van
het frame

Oplaadpunt met
magnetische
koppeling, geen losse
batterij nodig.

Bedieningspaneel.

Optioneel

7057 0508
Wiel 125
Richtingvaststelling.



6840 5661
Voorsluiting set met
extra vergrendeling.



6950 5624
Platilon rugleuning.



Opties

- Productnr. 7056 5001 Armlegger recht
- Productnr. 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- Productnr. 6975 8044 Veiligheidsgordel kunststof clip
- Productnr. 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- Productnr. 6950 5624 Platilon rugleuning
- Productnr. 6950 5625 Platilon zitting U-model
- Productnr. 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

Technische specificaties

Total lengte van het onderstel	106 cm
Totale breedte van het onderstel	70 cm
Draaicirkel	120 cm
Kantelverstelling	0 tot 30 graden
Elektrische voeding	24V
Batterijcapaciteit	7Ah
Waterdichtheid	IPX4
Aantal hefbewegingen	40 hefbewegingen (omhoog/omlaag) met volledig opgeladen batterijen
Diepte-/hoogteverstelling van hoofd-/nekondersteuning	7 - 12 cm

5100 5605

Reflex 5605 douche-toiletstoel

Deze in hoogte verstelbare douche-toiletstoel is een multifunctionele oplossing voor hygiënische zorg en ondersteunt cliënten met een verminderde mobiliteit. De stoel bestaat uit een onderstel en een ergonomisch gevormde zitting die zowel comfort als functionele stabiliteit biedt. De traploze elektrische hoogte- en kantelverstelling stelt zorgverleners in staat om in een veilige en ergonomische werkhouding te werken, terwijl de cliënt gedurende de zorg comfortabel en goed ondersteund blijft. De stoel kan bovendien tot 30° achterover kantelen, wat extra veiligheid en ontspanning biedt.


Het ontwerp maakt toiletgebruik en wassen mogelijk zonder onnodige transfers en is voorzien van een geleidersysteem voor een ondersteek of toiletemmer. Het stevige onderstel is zeer wendbaar en uitgerust met vier geremde zwenkwielen voor optimale veiligheid en stabiliteit tijdens gebruik. Of de stoel nu naast het bed, in de badkamer of boven een toilet wordt gebruikt, dit hulpmiddel biedt een naadloze combinatie van gebruiksgemak, hygiëne en comfort voor zowel zorgverlener als cliënt.



Hoofd-/nekondersteuning



Zwenkwiel met individuele rem

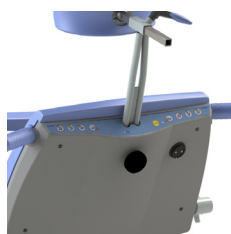

Bedieningspaneel.



Technische specificaties

Max. belasting	135 kg
Productgewicht	53 kg
Zitbreedte	47 cm
Zitdiepte	44 cm
Zithoogte (verstelling)	50 tot 100 cm

 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



Geschikt voor mensen met een zeer licht tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

5100 5605

Reflex 5605 douche-toiletstoel

Optioneel

6960 8026
Verstelbare comfortabele
beenondersteuning.

Ergonomische hand-
greep voor soepele
en lichte bediening

Armsteunen met voor-
waartse sluiting voor extra
veiligheid en zekerheid

Universele geleider
voor po/ondersteek

Ergonomische zitting

Sterk en stabiel
frame voor maximale
veiligheid en
ondersteuning

Bumper ter bescherming
van het frame



Technische specificaties

Totale lengte van het onderstel	106 cm
Totale breedte van het onderstel	70 cm
Draaicirkel	120 cm
Kantelverstelling	0 tot 30 graden
Elektrische voeding	24V
Batterijcapaciteit	7Ah
Waterdichtheid	IPX4
Aantal hefbewegingen	40 hefbewegingen (omhoog/omlaag) met volledig opgeladen batterijen
Diepte-/hoogteverstelling van hoofd-/nekondersteuning	7 cm / 12 cm

Opties

- Productnr. 7056 5001 Armlegger recht
- Productnr. 6950 1104 Po steek met deksel kunststof
- Productnr. 6975 8044 Veiligheidsgordel kunststof clip
- Productnr. 6975 8045 Veiligheidsgordel 4-punts rvs sluiting
- Productnr. 6950 5624 Plaiton rugleuning
- Productnr. 6950 5625 Plaiton zitting U-model
- Productnr. 6960 8026 Comfort beensteun set afneembaar
- Productnr. 7057 0508 Wiel 125 Richtingvaststelling

LFT5600-2026-01 NL



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Alle door Lopital geproduceerde hulpmiddelen voldoen aan de geldende normen voor medische producten van Klasse I (MDR (EU) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.