

Sirocco

Veilig en betrouwbaar douchen

6100 2500 / 6100 2505

Sirocco Basic douchebrancard

De Sirocco Basic 6100 2500 combineert een eenvoudig, in hoogte verstelbaar ontwerp met gebruiksvriendelijke bediening, waardoor het een uitstekende keuze is voor dagelijkse zorgomgevingen. Dankzij het elektrische hoog-laag systeem en de intuïtieve handbediening kunnen zorgverleners de brancard op de optimale werkhoogte instellen. Dit vermindert de fysieke belasting en zorgt voor een comfortabelere douche-ervaring voor cliënten.

Voor zorginstellingen die een eenvoudigere oplossing zoeken, biedt de Sirocco Basic 6100 2505 een uitvoering met vaste hoogte die dezelfde robuuste kwaliteit en hetzelfde comfort voor de cliënt levert. Dit model is bijzonder geschikt in situaties waar verstelbaarheid minder belangrijk is, maar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel blijven. Beide Sirocco Basic uitvoeringen zijn uitgerust met hoogwaardige materialen en een zachte, ondersteunende matras, wat zorgt voor veiligheid en comfort tijdens de dagelijkse zorgroutine.

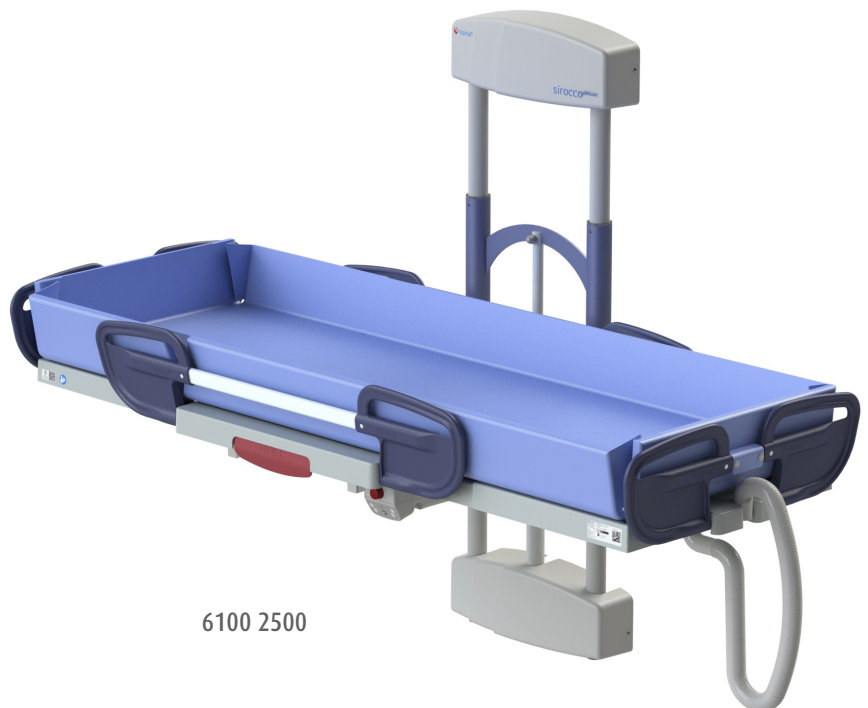
Opvouwbaar & Functioneel. Om waardevolle vloerruimte te besparen, kan de Sirocco eenvoudig worden opgeklapt terwijl volledige stabiliteit en prestaties behouden blijven.

Ergonomisch in Gebruik. Het in hoogte verstelbare ontwerp en de soepele positionering verminderen de fysieke belasting en zorgen voor comfortabele en efficiënte zorg op elke werkhoogte.

Betrouwbaar & Duurzaam. Ontworpen voor dagelijks gebruik en ondersteund door 60 maanden garantie, voor betrouwbare prestaties.

Antibacterieel & Corrosiebestendig. De antibacteriële coating met zilverionen ondersteunt hygiëne en infectiepreventie, terwijl het corrosiebestendige frame met gladde oppervlakken zorgt voor duurzaamheid en eenvoudige reiniging.

🌐 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl



6100 2500

Technische specificaties


Hoog-laag aandrijving	Elektrisch (alleen 6100 2500)
Handbediening	Vierknops handbediening met ophanghaak, IPX6
Controlbox	24VDC, max. 250 W, IPX6
Accubox	24V, 2.9 Ah, IPX6
Lader	100-240V AC, 50-60 Hz, max 1A, Wandoplader




Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig verminderde mobiliteit

6100 2505

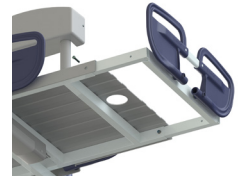Sirocco Basic vaste hoogte douchebrancard



Met geïntegreerde lengteverstelling.

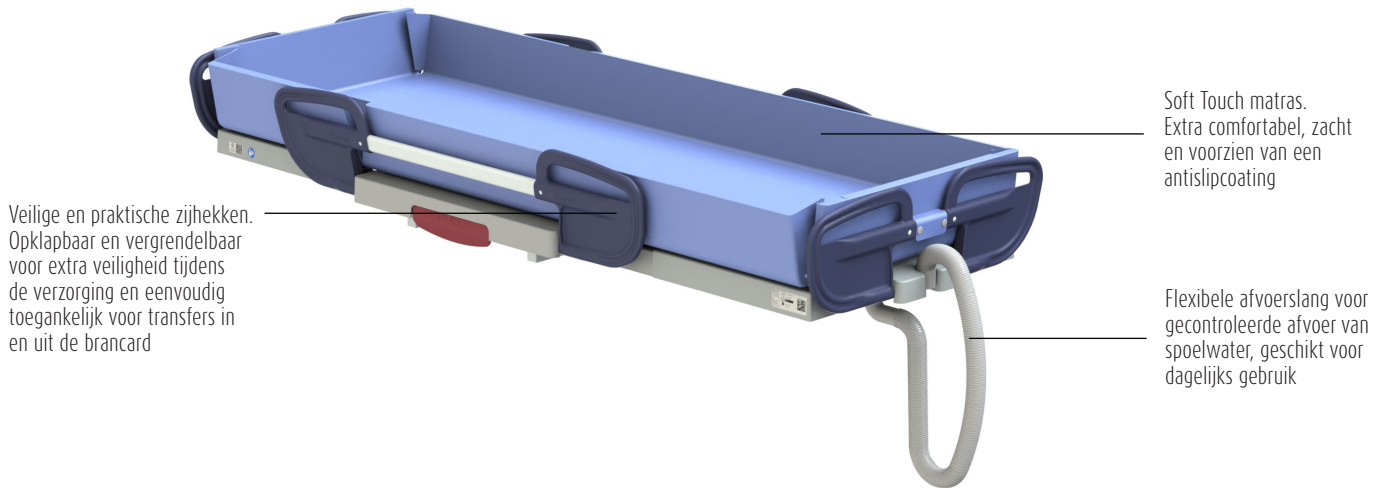

Veilige en praktische zijhekken. Opklapbaar en vergrendelbaar voor extra veiligheid tijdens de verzorging en eenvoudig toegankelijk voor transfers in en uit de brancard

Soft Touch matras. Extra comfortabel, zacht en voorzien van een antislipcoating

Flexibele afvoerslang voor gecontroleerde afvoer van spoelwater, geschikt voor dagelijks gebruik



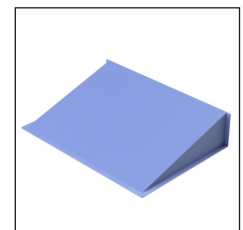
70205004
Handbediening
met batterij-
indicatie



70205003
Accubox

Optioneel

70200034 Hoofdkussen
(een hoofdkussen
is inbegrepen bij de
basismodellen).



Art.nr.	Art. omschrijving	Buiten lengte	Buiten breedte	Binnen lengte	Binnen breedte	Ligvlak hoog / laag	Max. belasting	Productgewicht
6100 2500	Sirocco Basic douchebrancard	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6100 2505	Sirocco Basic douchebrancard	186 206	93	170 – 190	70 – 93	–	150 kg	71 kg
6100 2510	Sirocco Deluxe douchebrancard	186 206	93	170 – 190	70 – 93	45 – 95	227 kg	75 kg
6720 0005	Matras Basic 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0010	Matras Basic 206 cm	–	–	190	70	–	–	–
6720 0015	Matras Deluxe 186 cm	–	–	170	70	–	–	–
6720 0020	Matras Deluxe 206 cm	–	–	190	70	–	–	–

*Alle maten in deze tabel zijn in centimeters.

6100 2510

Sirocco Deluxe douchebrancard

De Sirocco Deluxe bouwt voort op de voordelen van de Sirocco Basic-modellen en biedt extra functionaliteit voor meer flexibiliteit. Dankzij de traploos elektrisch verstelbare rugleuning kan de cliënt comfortabeler worden gepositioneerd, wat zowel ontspanning als efficiënte zorg ondersteunt. Deze functie is vooral waardevol tijdens langere wasmomenten, waarbij verschillende houdingen het comfort vergroten en de fysieke belasting voor de zorgverlener verminderen.

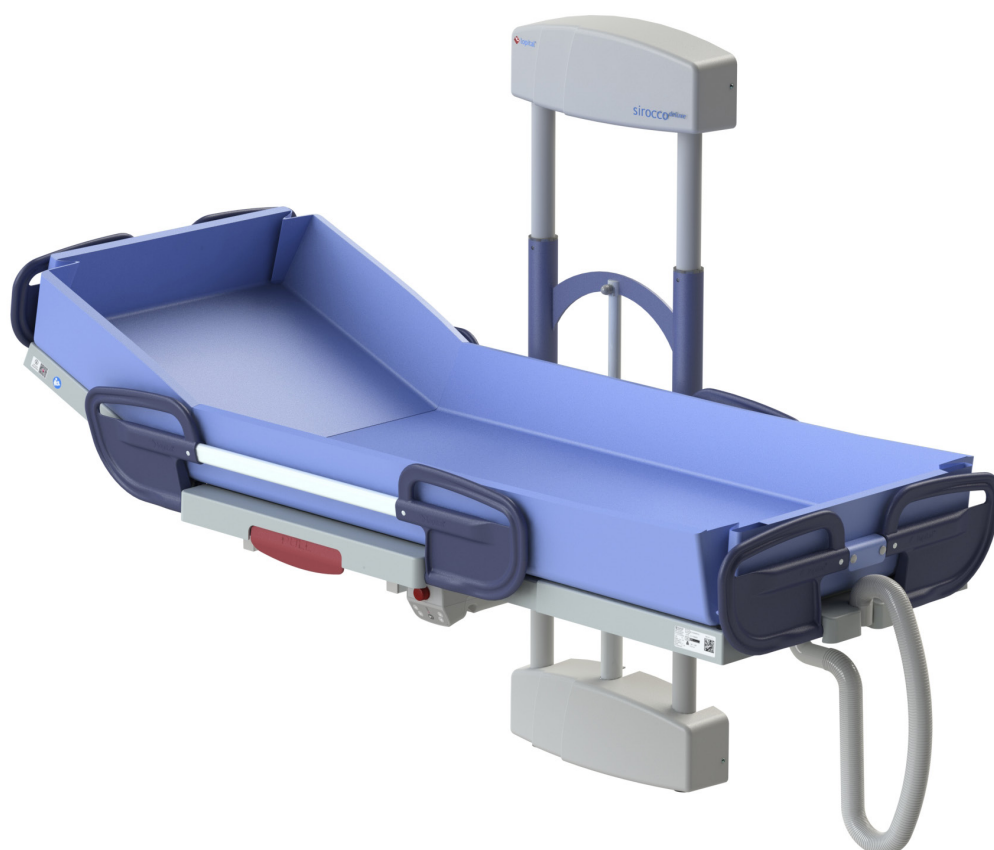
Met zijn nauwkeurige bediening en soepele werking is de Sirocco Deluxe ontworpen voor zorgomgevingen waar aanpasbaarheid en cliëntcomfort centraal staan. Het systeem combineert betrouwbaarheid met doordachte functies die zorgverleners helpen om dagelijks veilige, waardige en efficiënte hygiënische zorg te bieden.



Ingeklapte positie



Demontage van ligplaat en matras



 Ontdek onze hulpmiddelen in actie via de interactieve productvideo's op onze website: www.lopital.nl

Technische specificaties

Hoog-laag aandrijving	Elektrisch
Handbediening	Vierknops handbediening met ophanghaak, IPX6
Controlbox	24VDC, max. 250 W, IPX6
Accubox	24V, 2.9 Ah, IPX6
Lader	100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A, Wandoplader
Rugverstelling	tot 25 graden



Geschikt voor mensen met een ernstig tot zeer ernstige verminderde mobiliteit

Vlamvertragend (M2-norm).

Voldoet aan de M2-brandveiligheidsnorm voor extra bescherming in professionele zorgomgevingen.

Soft Touch matras.

Extra comfortabel, zacht aanvoelend en voorzien van een antislipcoating voor extra veiligheid.

Antibacterieel.

Het matras is antibacterieel dankzij de toevoeging van zilverionen.

Hoge krasbestendigheid.

Het duurzame oppervlak is bestand tegen slijtage en beschadigingen en behoudt langdurig een schone en professionele uitstraling.

REACH-conform en cadmiumvrij.

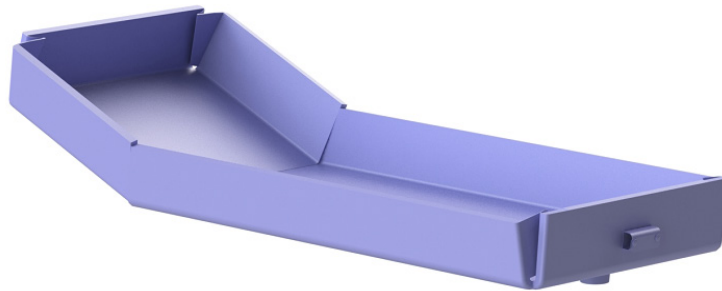
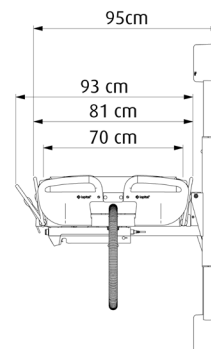
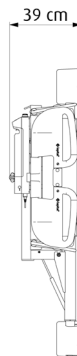
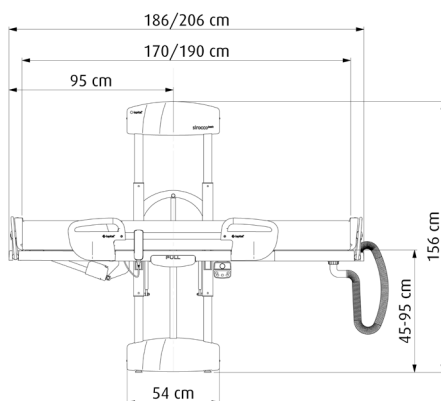
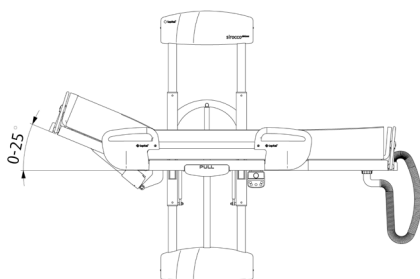
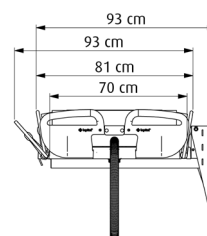
Geproduceerd volgens de REACH-richtlijnen en vrij van cadmium voor een veiliger en milieubewust gebruik.

Veilig en huidvriendelijk matras.

Vrij van schadelijke stoffen zoals ftalaten – ideaal voor de gevoelige huid en veilig voor dagelijks gebruik.

Duurzaam meerlaags matras.

Bestaat uit vier lagen PVC voor extra comfort, langdurige ondersteuning en uitstekende bestendigheid tegen water en slijtage.

**6100 2500****6100 2510****6100 2505**

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

